


Easy Walk®

kite AFO

Gebrauchsanweisung


Wie man die Pre-Preg Carbon Orthese in 7 einfachen Schritten anpassen?

ORTHO BALTIC

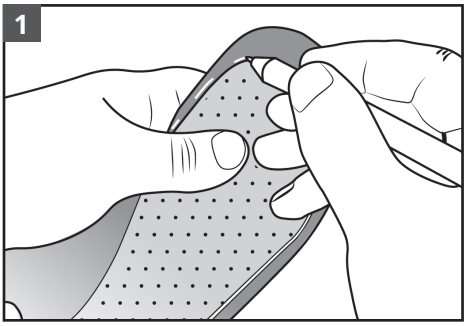


1. Sohlenform anpassen

Die Kontur der Orthesensohle muss die innere Schuheinlagenform anpassen. Wählen Sie die richtige Orthesengröße, nehmen die Einlage aus dem Schuh, markieren die Einlagenform auf der Orthesensohle.

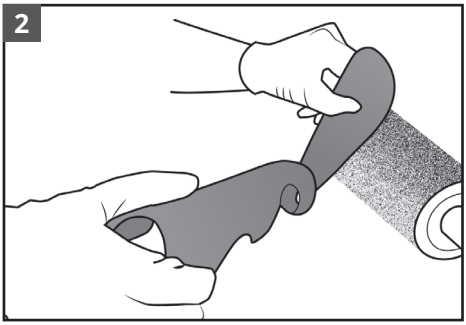


2. Schleifen

Schleifen Sie die Sohle bis zur markierten Kontur. Verwenden das Schleifpapier (Körnung 60) fürdie Schleifmaschine.

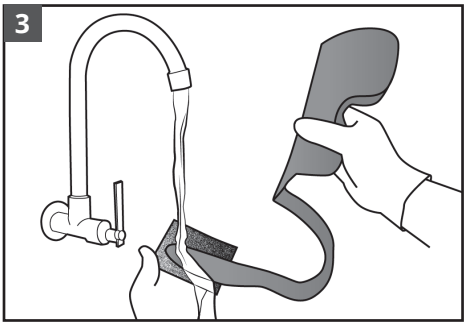


3. Kantenbearbeitung

Die Kanten der geschleuften Orthese sind scharf und können den Schuh schneiden oder eine Verletzung verursachen. Deshalb sollen die sorgfältig geglättet und abgeschmirgelt unter dem Wasserstrom mit einem wasserdichten Schleifpapier (Krönung150) sein.

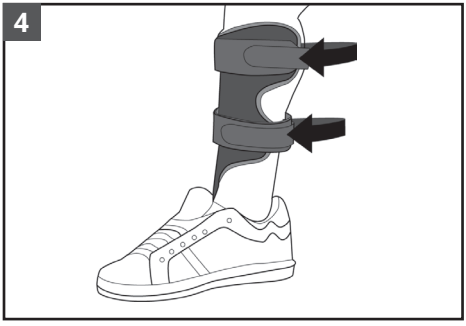


4. Befestigung


Der Patient soll die Orthese und Schuhe anziehen, dann die Gürtel um den Unterschenkel gürten und befestigen.

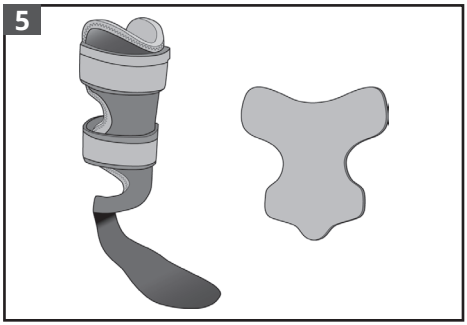


5. Platzieren der zusätzlichen Polsterung. Die Orthese ist schon mit einer 3 mm Polsterung. Falls der Patient sich unwohl fühlt oder die Orthese im Wadenbereich zu weit ist, darf mann eine zusätzliche Polsterung, die ist beigelegt, anpassen. Wenn die dickere Polsterung nicht notwendig ist, lassen die Nr. 5 fort. Auf anderen Fall, folgen die Gebrauchsanweisung weiter.

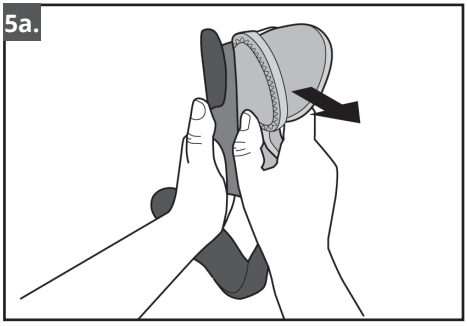


5a.
Ziehen die Polsterung leicht und vorsichtlich. Stellen Sie sich sicher, dass die Hacken von dem Klettverschluss auf der inneren Orthesenseite geblieben sind.

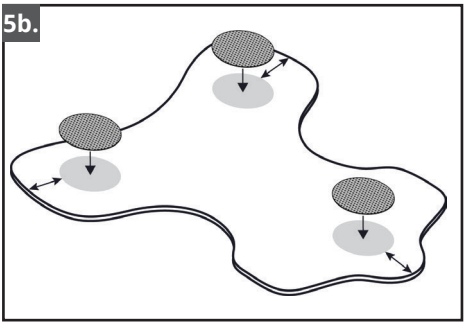


5b.
Kleben die 3 runde Klettverschlüsse auf der zusätzlichen Polsterung so wie auf dem Bild links steht. Verwenden Sie die Heißluftpistole um die Klettverschlüsse vorzubereiten und kleben auf der zusätzlichen Polsterung. Von der Polsterungskante lassen etwa 5 - 10 mm frei.

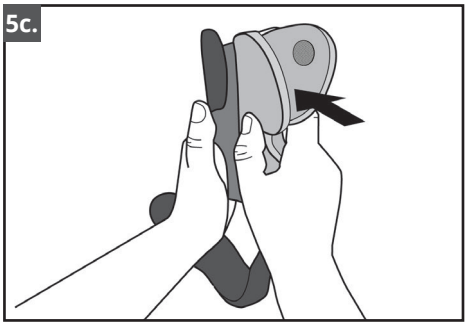

5c.
Kleben Sie die vorbereitete Polsterung. Lassen Sie einen gleichmäßigen Abstand zwischen der Polsterung und dem Rand des Wadenhalters.

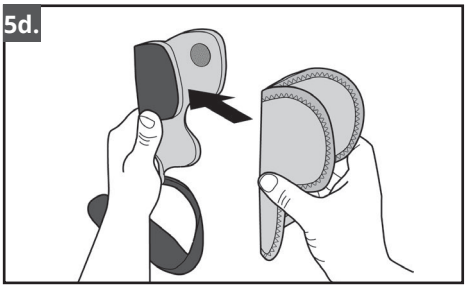


5d.
Nach dem Einlegen der zusätzlichen Polsterung, legen auch die erste Polsterung auf.

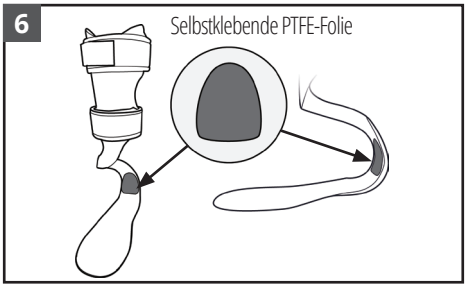

6. Selbstklebende PTFE-Folie mit geringer Reibung.


Es wird empfohlen die Folie mit niedriger Reibung (beigelegt) verwenden um die Reibung der Ferse zu verringern. Entfernen Sie den Folienschutz und kleben an Ferse, wie auf dem Bild gezeigt. Diese Folie soll Blasen, Reibung und Wunden im Fersenbereich verhindern.

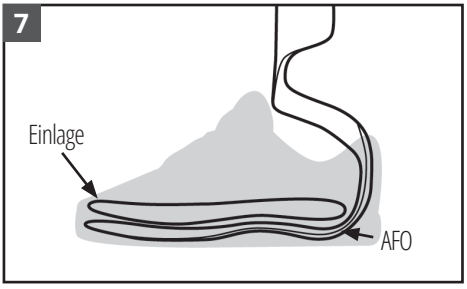

7. Orthese in der Schuh einlegen.

Nehmen die Einlage heraus, legen die Orthese in den Schuh und legen die Einlage zurück. Wenn der Schuh ohne Einlage ist, einfach die Orthese in den Schuh einlegen. Die Orthese soll fest angepasst sein und nicht rutschen.

Ersatzteilset

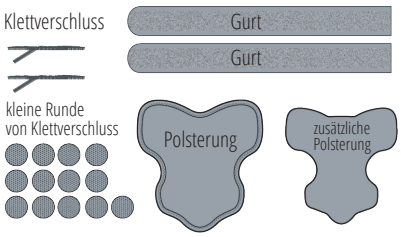

Wichtige Hinweise

- Die Struktur der Orthesensohle und anderen Bestandteilen sollen nicht verletzt werden um die funktionierende Konstruktion zu behalten.
- Die Orthese kann nicht durch Erwärmen umgeformt werden.
- Beim Schleifen oder Scheren schützen Ihre Augen, bedecken die Nase und Mund.

Hersteller: Ortho Baltic UAB
Taikos Str. 131A
LT-51124 Kaunas, Litauen

Tel.: +370 37 473970
E-Mail: info@orthobaltic.lt
www.orthobaltic.eu